




**Bilge Elektronik Ltd. Şti.**  
**Eczanem Otomasyon Sistemi**


**Windows 8**  
**İşletim Sistemi**  
**Ayarları**

## 1. Kullanıcı Hesap Denetim Ayarı :


Kullanıcı Hesap Denetimi ayarını yapmak için Sağ menüden **Ayarlar** altındaki **Denetim Masasına** girelim:

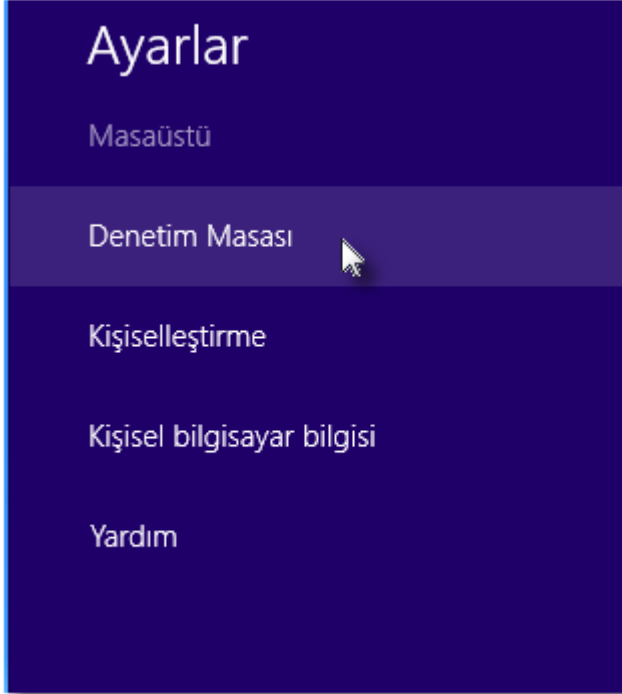

Açılan **Denetim Masası** bölümünden "**Kullanıcı Hesapları ve Aile Koruması**" bölümüne girelim:

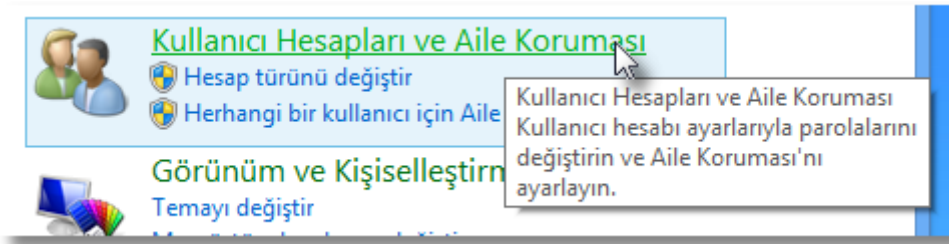

**Kullanıcı Hesapları** bölümüne girelim:

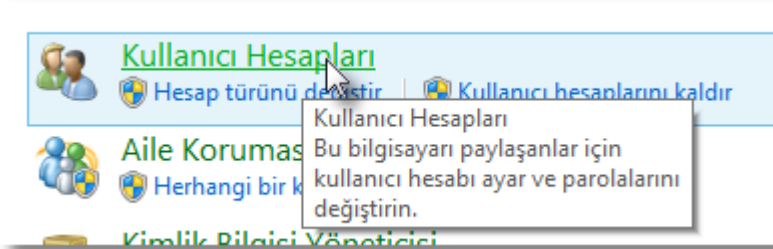

**Kullanıcı Hesabı Denetimi ayarlarını deęiřtirin** bölümünü açalım:

Kullanıcı hesabınızda deęiřiklikler yapın

Kiřisel bilgisayar ayarlarında hesabımda deęiřiklik yap

- Hesabınızın adını deęiřtirin
- Hesap türünüzü deęiřtirin
- Bařka bir hesabı yönetin
- [Kullanıcı Hesabı Denetimi ayarlarını deęiřtirin](#)

Yusuf  
Yerel Hesap  
Administrator

Bu bölümü ařaęıdaki řekilde ayarları yapıp **Tamam** butonu ile ayarları kaydedelim.

Her zaman uyar

Hiçbir zaman uyar

**řu durumda beni hiçbir zaman uyarma:**



- Uygulamalar yazılım yüklemeyi veya bilgisayarımda deęiřiklikler yapmayı denedięinde
- Windows ayarlarında deęiřiklik yaptıęımda

Önerilmez.


Tamam İptal

## 2. Klasör Güvenlik Ayarları :


Bilgisayarımdan C Sürücüsüne girelim ve **Eczanem** klasörü üzerinde sağ tıklayarak menüden **özelliklere** girelim:

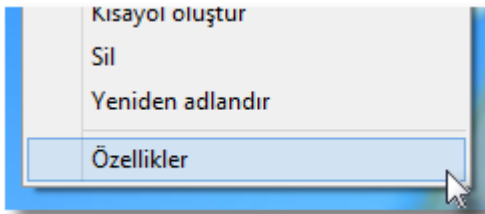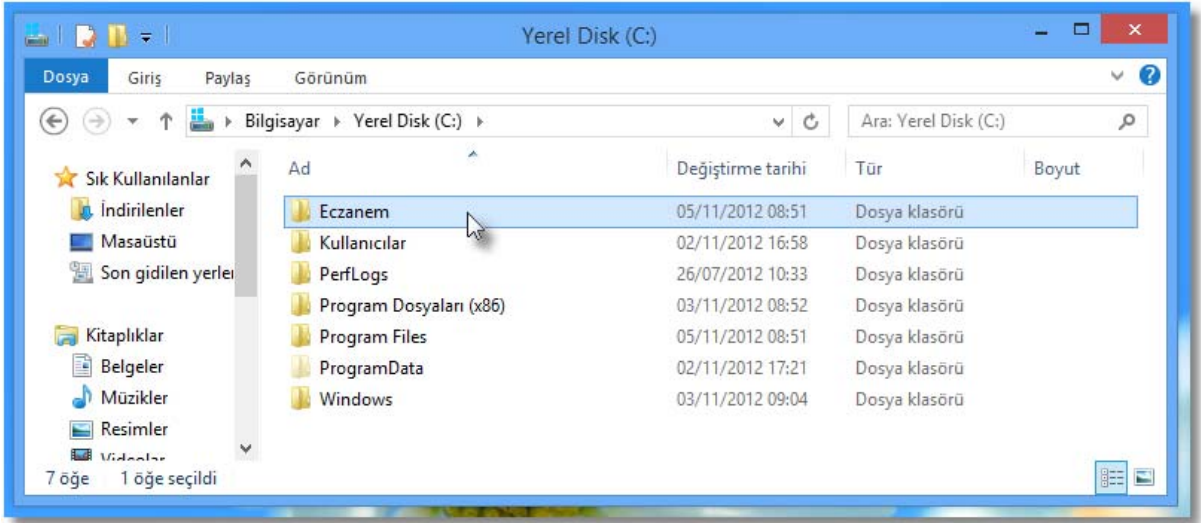


Ekrana gelen **Eczanem Özellikleri** penceresinden **Güvenlik** sekmesini açıp **Düzenle** butonunu seçelim :

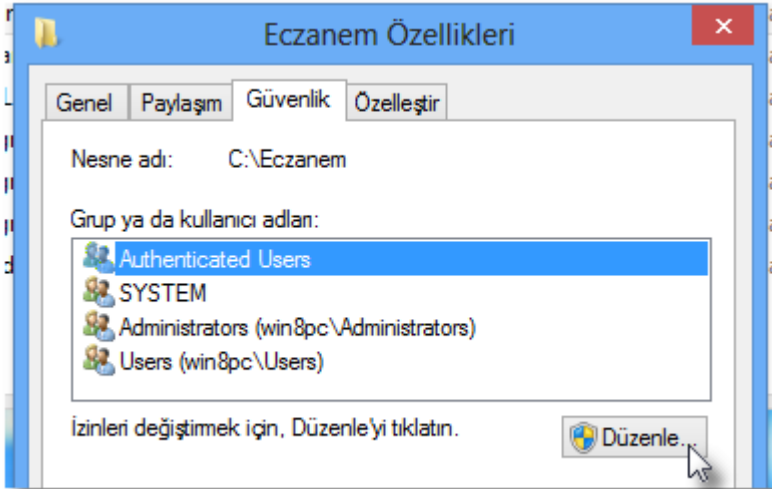


İzinler ekranı açılacaktır. **Ekle** butonunu seçelim:

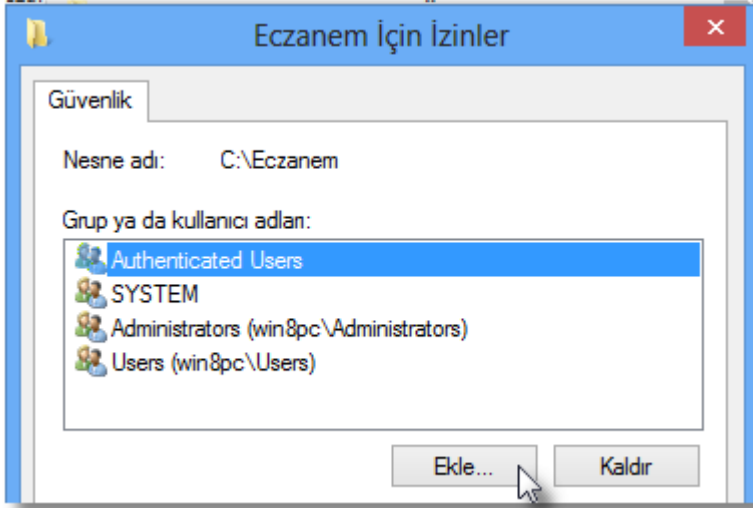


Seçilecek nesne kutucuğuna **Everyone** bilgisini girip **Tamam** butonu ile onaylayalım:

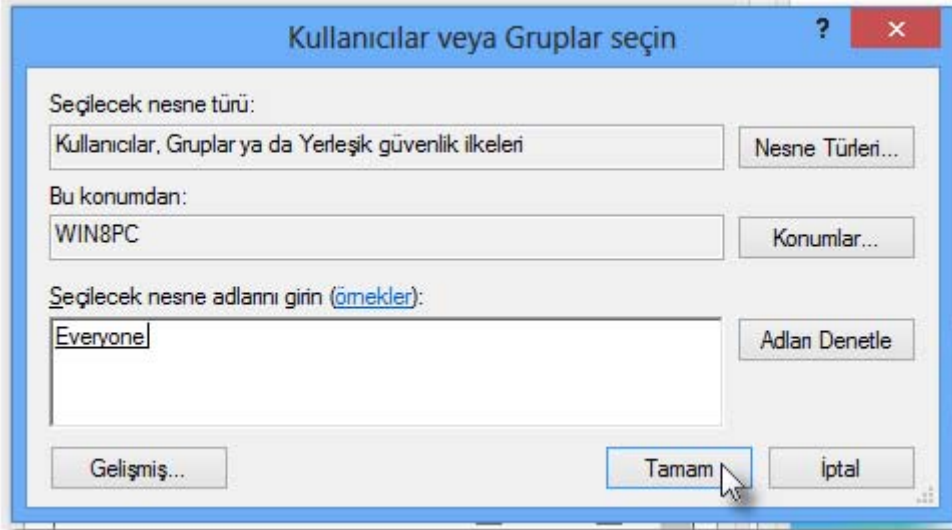

**Tam Denetim** kutusunu seçip, **Tamam** butonu ile ayarları onaylayalım:

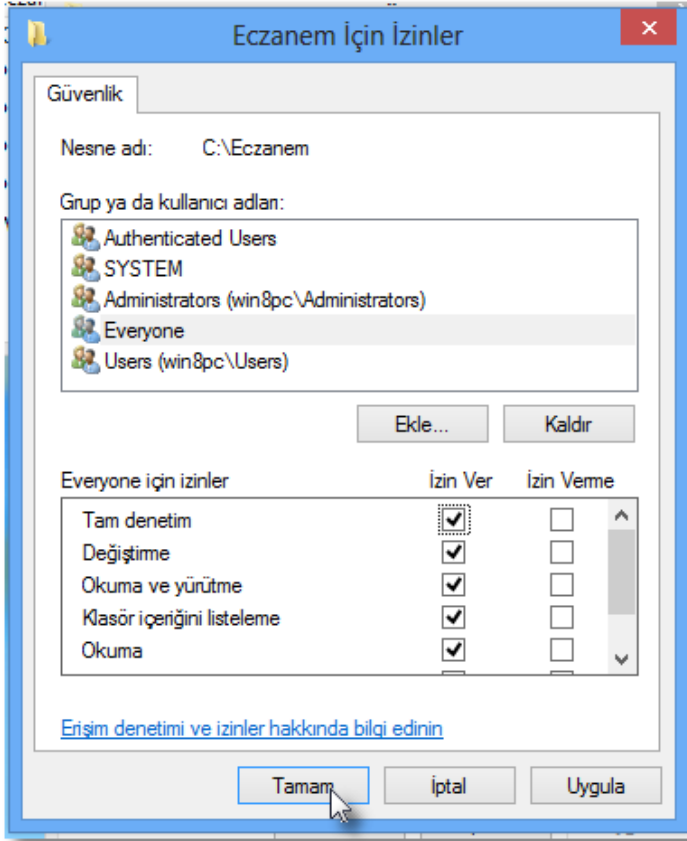


**Tamam** butonunu seçerek ayarların kaydını tamamlayalım:

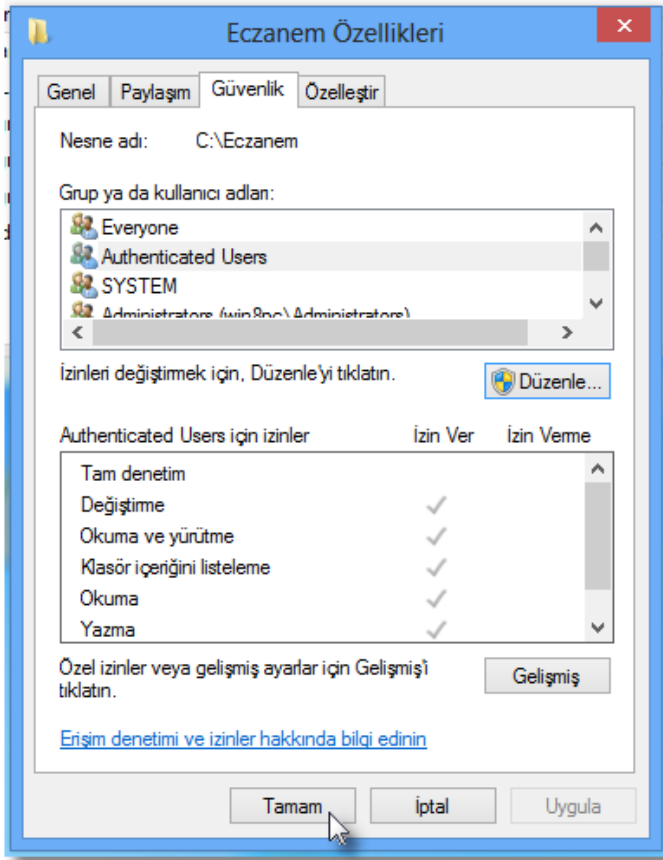


### 3. Reçete Sistem Ayarları


Bilgisayarımdan C sürücü altındaki **Eczanem** Klasörüne girelim:

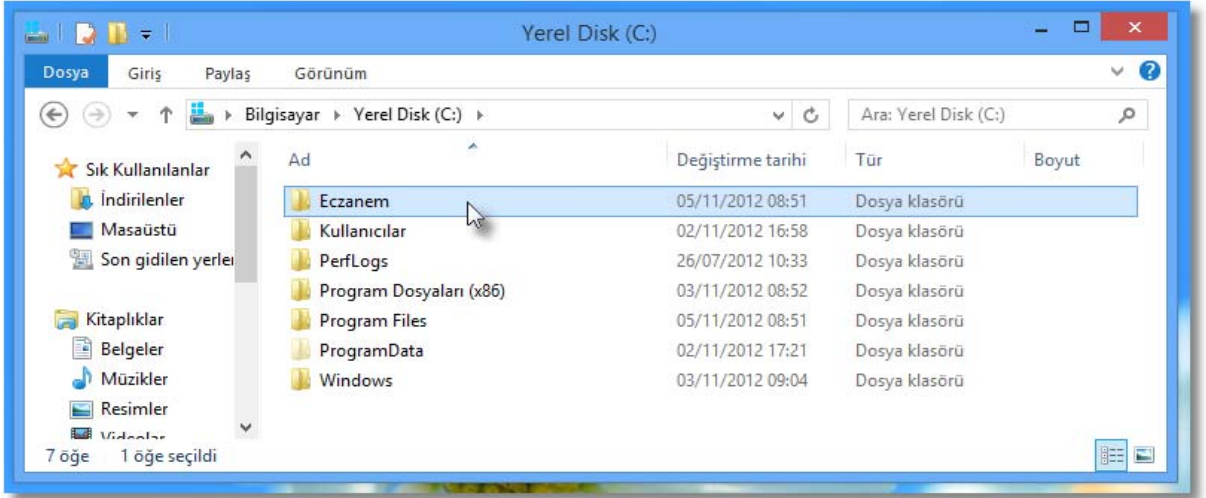


**Reçete** Klasörüne girelim:

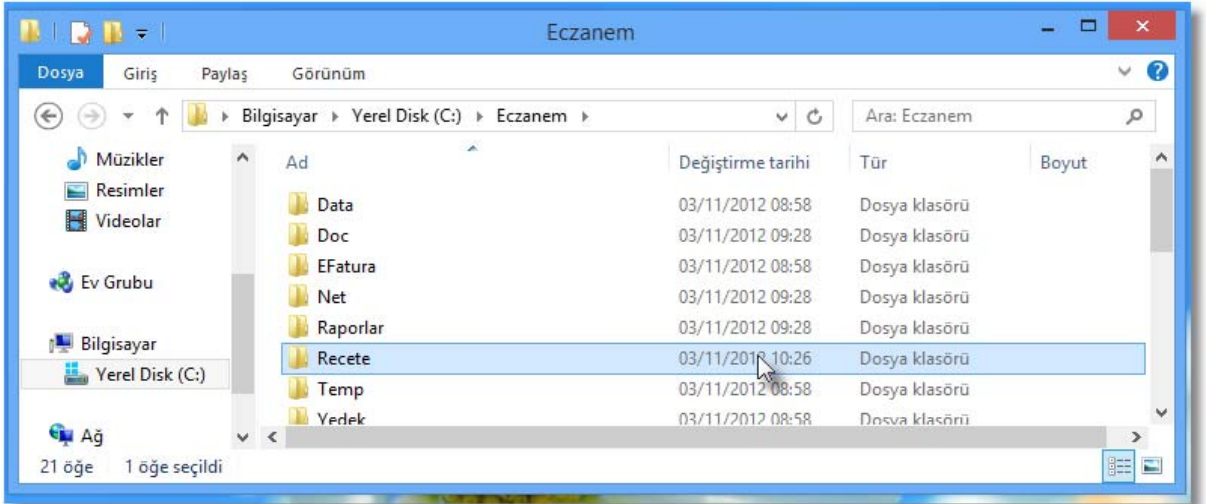


**Rec34** dosyası üzerinde Sağ tık ile **özelliklere** girelim:

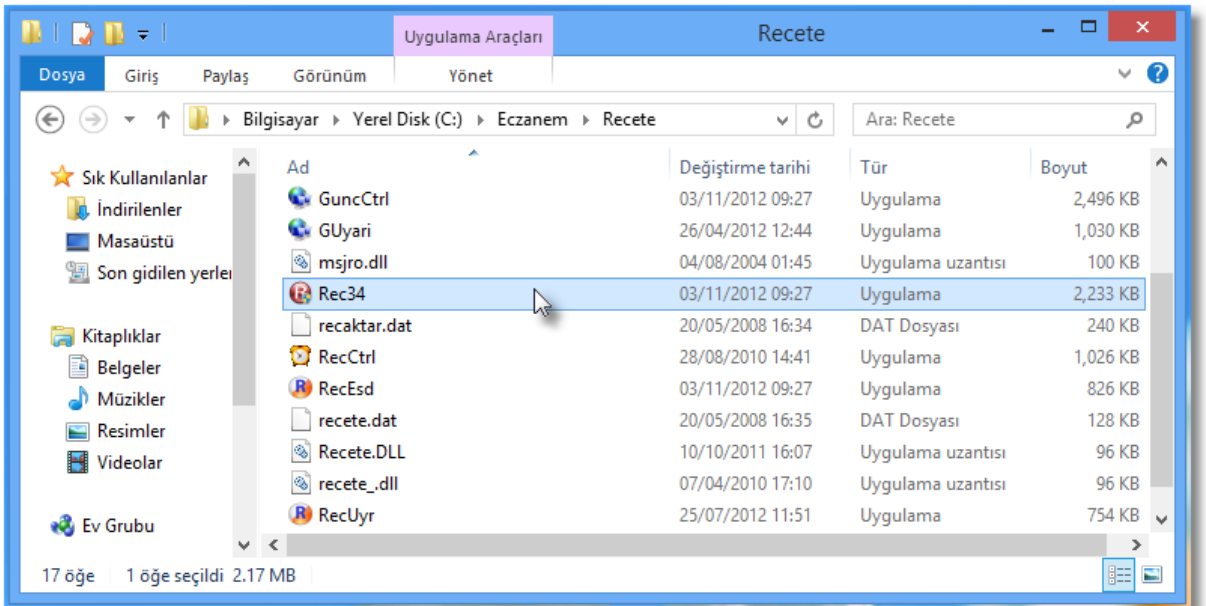

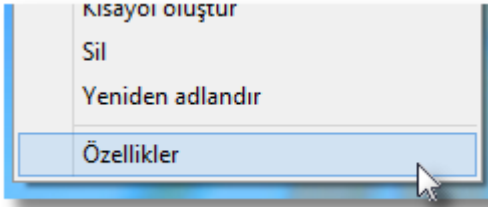

Rec34 Özellikleri ekranında Uyumluluk sekmesine girilir. Ayrıcalık düzeyi bölümündeki **"Bu programı yönetici olarak çalıştır"** işareti işaretlenip **"Tamam"** butonu ile ayarlar saklanır:

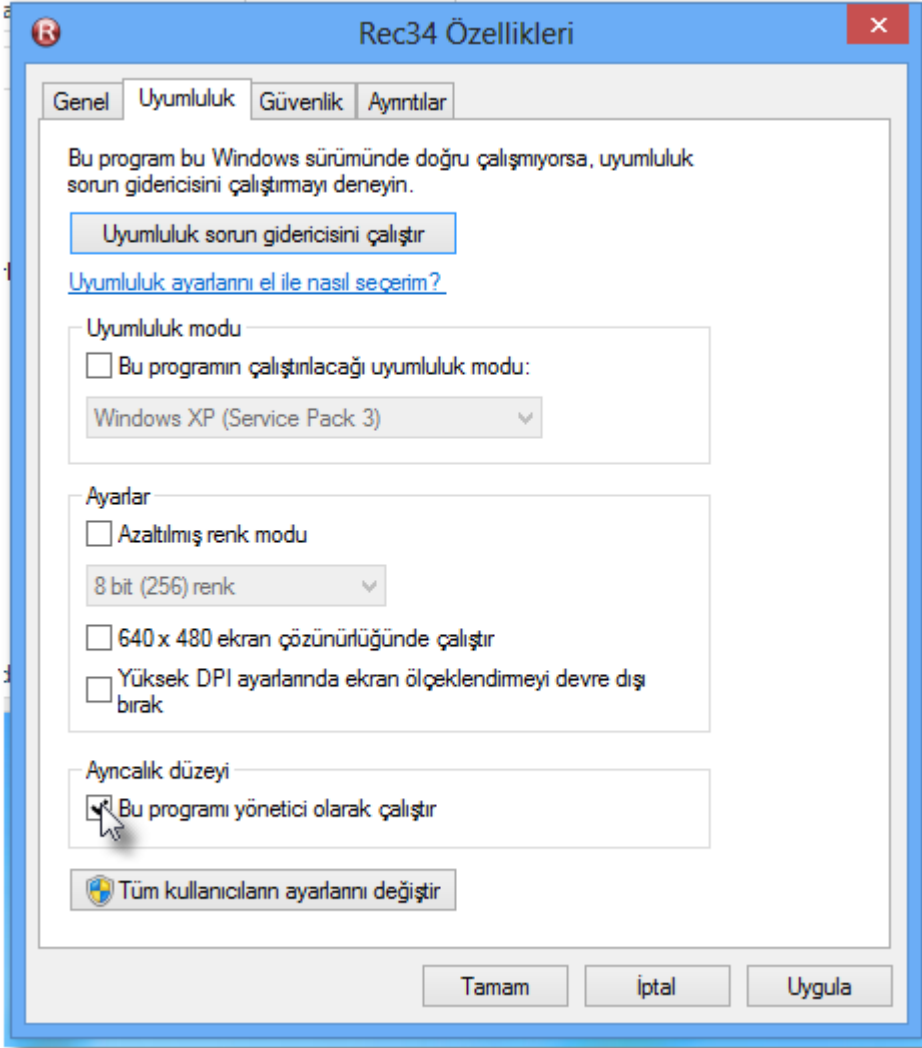


**Bu ayar değiştirildikten sonra bilgisayar yeniden başlatılır.**




#### 4. İnternet Explorer Ayarları


İnternet Explorer açılır ve **Araçlar** menüsünden "**İnternet Seçenekleri**" bölümüne girilir:

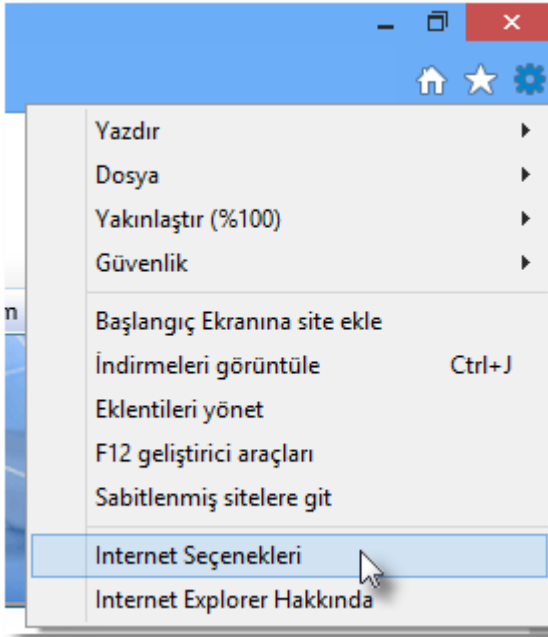


Güvenlik sekmesi altındaki "**Korumalı Modu Etkinleştir**" seçeneği kaldırılır:

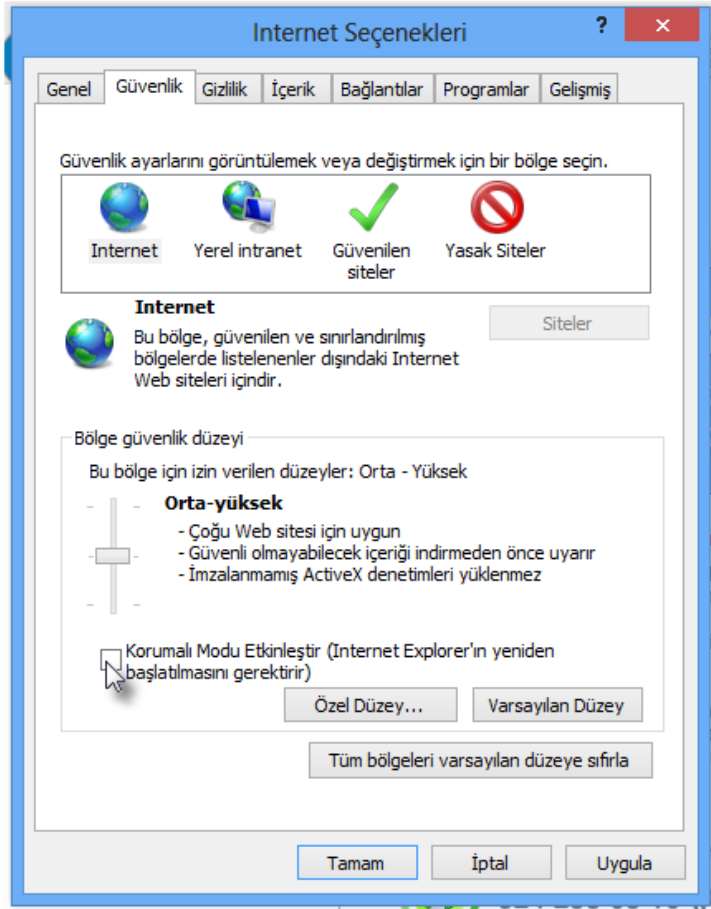

Programlar sekmesinden "Eklentileri Yönet" bölümü açılır:

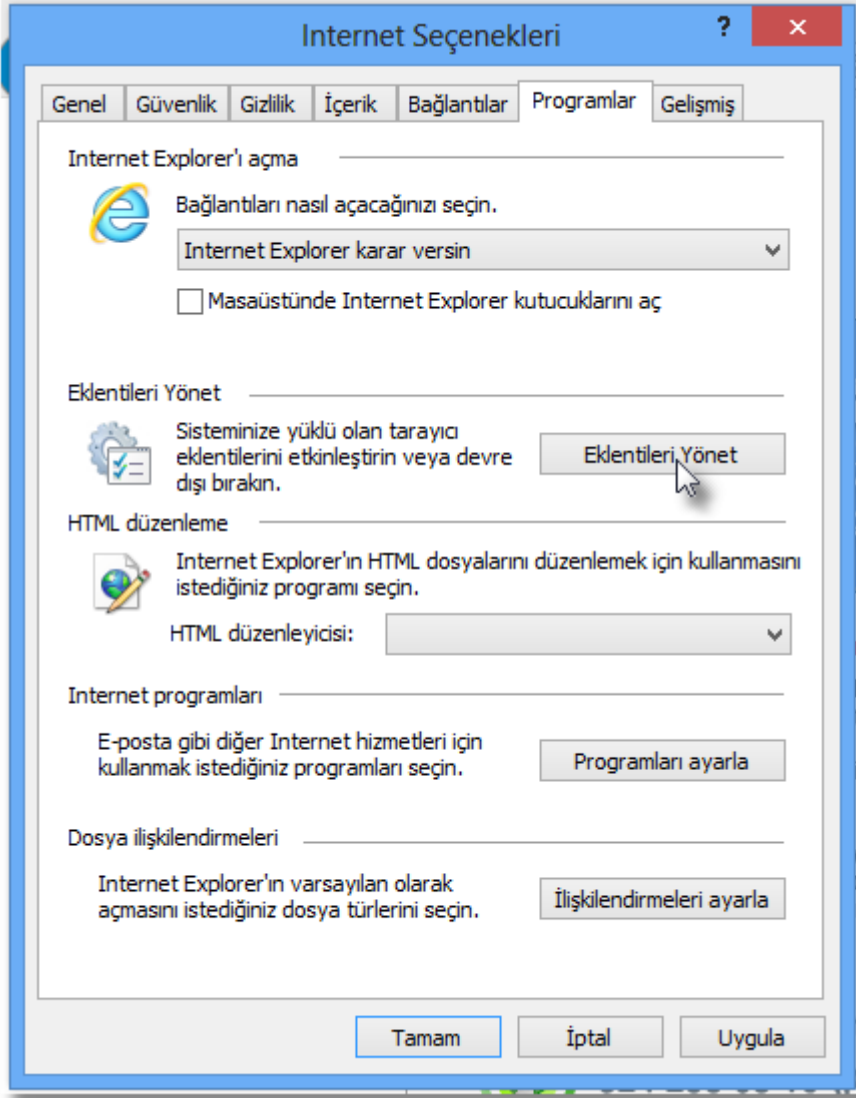

Bilge Elektronik - Reçete uygulaması etkinleştirilir:

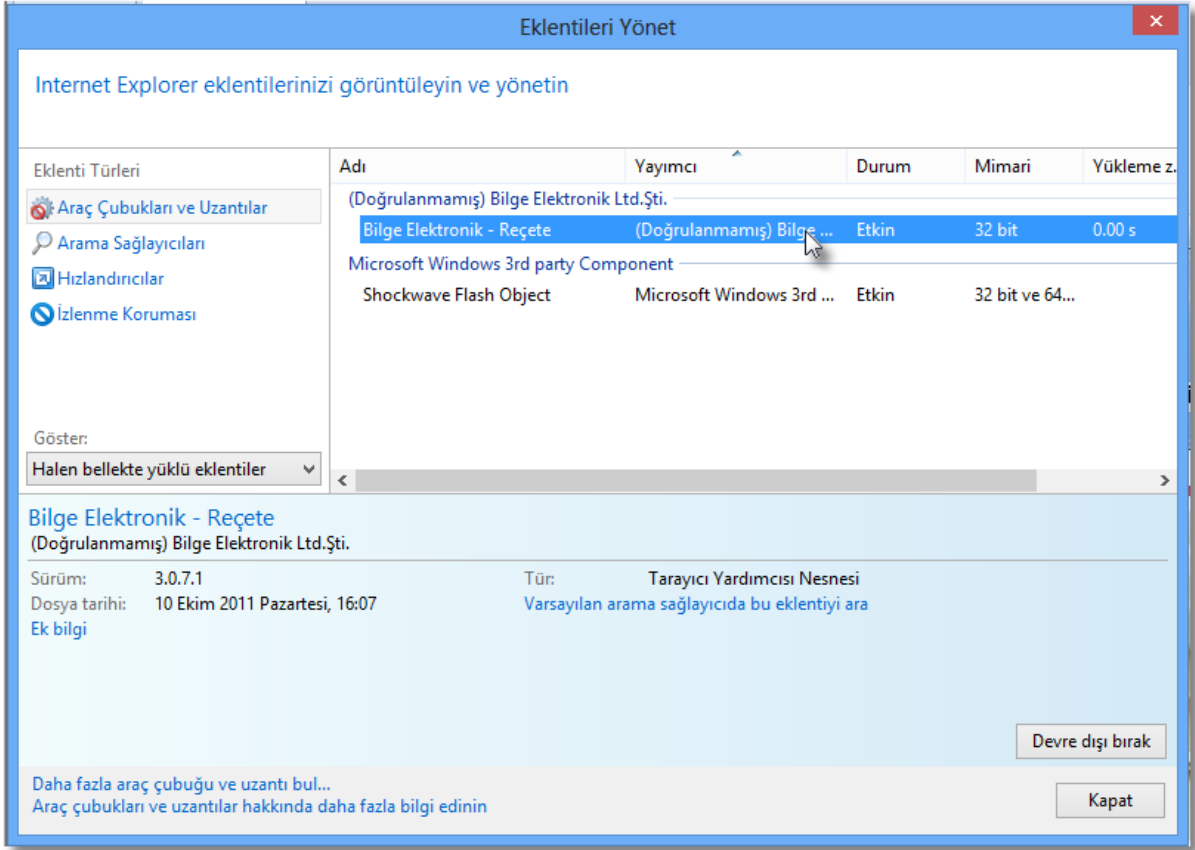

Eklenmeleri Yönet bölümü kapatılır ve Ayarların aktif olması için İnternet Seçenekleri ekranından **Tamam** butonu seçilir:



Ayarlar kaydedildikten sonra İnternet Explorer **kapatıp açmak** gerekmektedir. İnternet Explorer açıldıktan sonra Medula Sisteminden reçete girilerek sistemi çalışmasını test ediniz.